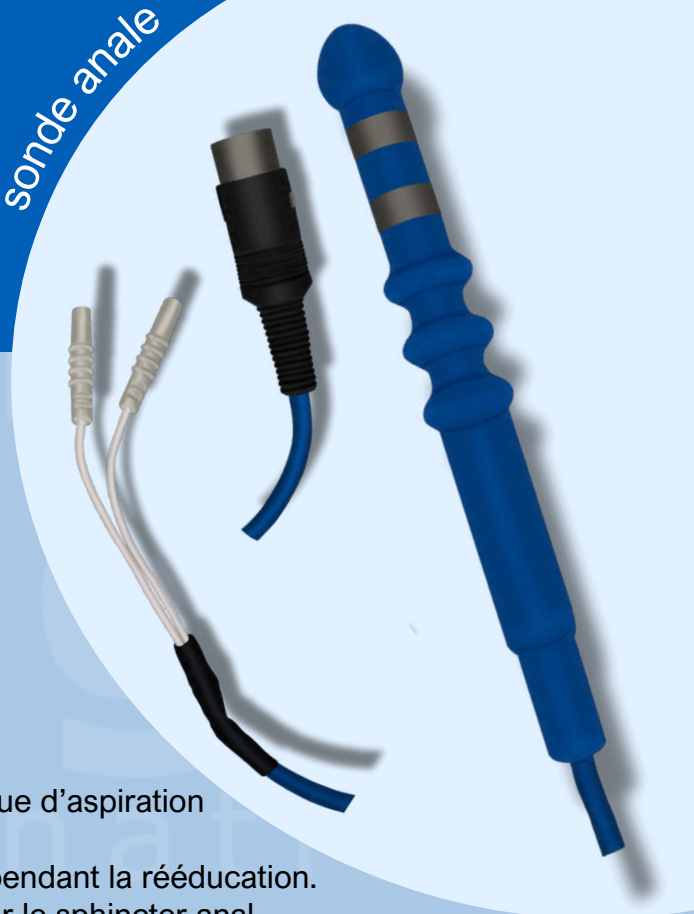




CARACTÉRISTIQUES

- 2 électrodes circulaires
- Connexion : fiche banane femelle 2mm ou DIN 3 mâle
- Diamètre : 1,6 cm
- Longueur : 13,5 cm
- Poids fiche banane : 57g
- Poids fiche DIN 3 : 32g

PRÉSENTATION

Sa longueur par blocage inter-fessiers permet d'éviter le risque d'aspiration ano-rectale.

Sa légèreté permet aux patient(e)s de ne pas être gêné(e)s pendant la rééducation.

Les électrodes circulaires sont positionnées pour se situer sur le sphincter anal.

Les 3 "encoches ou ressauts" facilitent le positionnement et le maintien de la sonde au niveau du sphincter anal.

INTÉRÊT PRATIQUE DE LA SONDE

1 - Stimulation électrique - SEF

- Stimulation globale classique D & G des muscles du sphincter anal

2 - Biofeedback - BFB/EMG

- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché
- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en position orthostatique

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA SONDE

1 - Stimulation électrique - SEF

- Insuffisance musculaire anale (directe)
- Renforcement musculaire phasique et/ou tonique
- Insuffisance sphinctérienne
- Hyperactivité vésicale
- Renforcement du pubo-rectal par voie trans anale

2 - Biofeedback - BFB/EMG : couché ou debout

- Prise de conscience anale globale
- Mise en évidence et mesure d'une insuffisance musculaire anale
- Contrôle des progrès de la récupération fonctionnelle
- Contrôle du verrouillage à l'effort, réflexe puis volontaire

3 - Traitement des incontinences par insuffisance musculaire anale

- Traitement des hypertonies anales