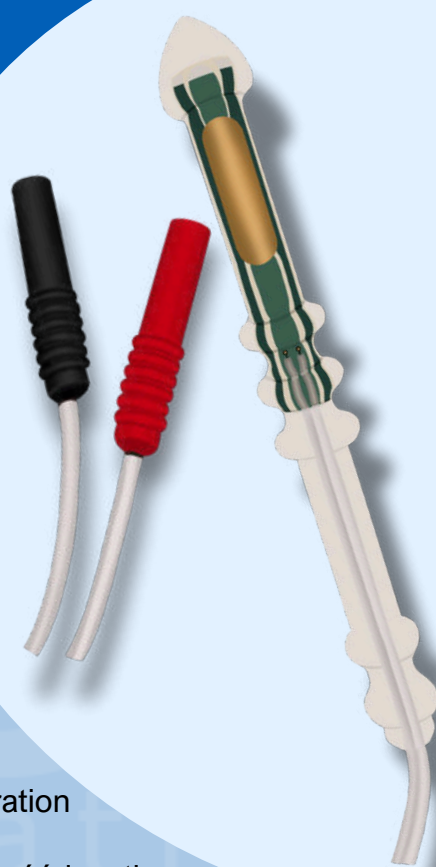




## CARACTÉRISTIQUES

- 2 électrodes latérales à barrettes
- Connexion : fiche banane femelle 2mm
- Diamètre : 1,6 cm
- Longueur : 14,5 cm
- Poids : 13g
- Sans nickel

## PRÉSENTATION

Sa longueur par blocage inter-fessiers permet d'éviter le risque d'aspiration ano-rectale.

Sa légèreté permet aux patient(e)s de ne pas être gêné(e)s pendant la rééducation.

Les électrodes à barrettes permettent un travail du canal anal par quadrant.

Les 3 "encoches ou ressauts" facilitent le positionnement et le maintien de la sonde au niveau du sphincter anal.

## INTÉRÊT PRATIQUE DE LA SONDE

### 1 - Stimulation électrique - SEF

- Stimulation globale classique D & G des muscles du sphincter anal

### 2 - Biofeedback - BFB/EMG

- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché
- Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en position orthostatique

## APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA SONDE

### 1 - Stimulation électrique - SEF

- Insuffisance musculaire anale (directe)
- Renforcement musculaire phasique et/ou tonique
- Insuffisance sphinctérienne
- Hyperactivité vésicale

### 2 - Biofeedback - BFB/EMG : couché ou debout

- Prise de conscience anale globale
- Mise en évidence et mesure d'une insuffisance musculaire anale
- Contrôle des progrès de la récupération fonctionnelle
- Contrôle du verrouillage à l'effort, réflexe puis volontaire

### 3 - Traitement des incontinences par insuffisance musculaire anale

- Traitement des hypertonies anales